


¿Qué es Best Breathe Filtro nasal?

Best Breathe Filtro es un dispositivo nasal compuesto por dos cilindros huecos conectados por un puente que albergan filtros recambiables en su interior que ayudan a retener la mayoría de las partículas que respiramos. El dispositivo está fabricado con material de grado médico en conformidad con la USP clase VI.




¿Por qué?

Evita la entrada a las fosas nasales de partículas con un diámetro comprendido entre 20 y 60 micras, dentro de este intervalo están la gran mayoría de tipos de polen atmosférico, polvo o aquellas partículas procedentes de la polución, evitando así la absorción de las mismas. Es reutilizable hasta 60 usos. Incluyen 30 filtros desechables para hasta 15 usos. Muy discreto, apenas es visible. Indicado para aquellas personas con problemas alérgicos, preocupadas por la polución ambiental o que trabajen en ambientes muy cargados.

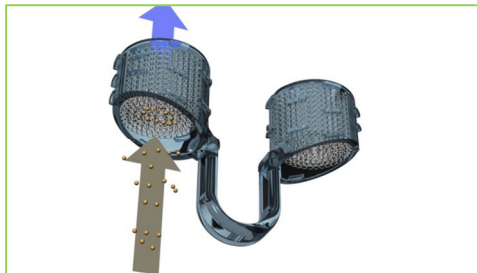



Sus dimensiones y características lo convierten en un dispositivo muy **discreto y cómodo** de llevar. No se deteriora por efecto del sudor o de la exposición al medio. Fabricado bajo estrictos controles de **calidad** y con **materiales de grado médico**.

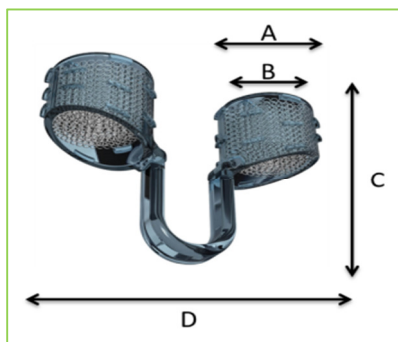

	A	B	C	D
	DIÁMETRO EXTERNO	DIÁMETRO INTERNO	ALTURA	ANCHO
TALLA/ SIZE	OUTSIDE DIAMETER	INSIDE DIAMETER	HEIGHT	WIDTH
XS	10mm	6mm	15mm	26mm
S	11mm	7mm	17mm	27mm
M	13mm	8mm	21mm	33mm
XL	14mm	10mm	23mm	37mm
XXL	15mm	11mm	26mm	43mm

El Filtro:


Nuestros filtros, están fabricados con espuma de poliuretano base poliéster de celdas totalmente abiertas y con el tamaño de poro controlado que permiten la filtración de forma eficiente. Los Filtros de repuesto se comercializan en cajas individuales de 30 Filtros desechables (hasta 15 días de uso)

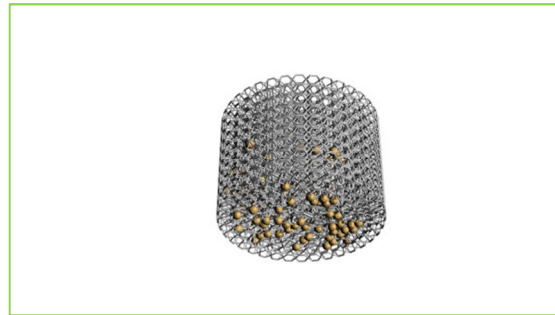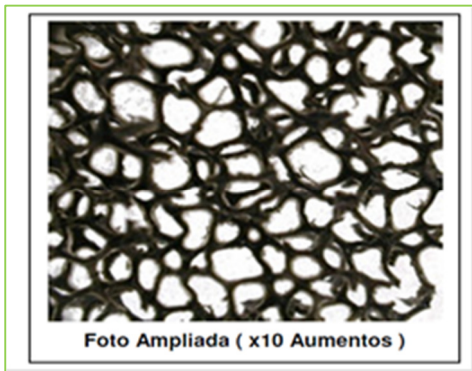

Indicado para:


- Personas que sufran de alergia al polen, ácaros, polvo y todas aquellas partículas en suspensión con un rango diametral entre 20 y 60 micras. Ayuda a aliviar la congestión nasal provocada por alergias, asma, procesos gripales, etc.
- Personas preocupadas por la polución ambiental
- Personas que trabajen en ambientes pesados o muy cargados.

Su diseño anatómico se **adapta perfectamente** tras un corto periodo de tiempo

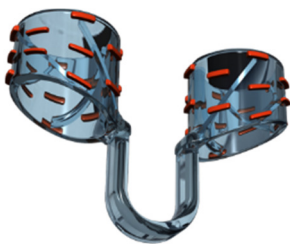

Sistema exclusivo de sujeción:

Proporciona una mayor comodidad, mejor adaptabilidad y una adaptación inmejorable. Esto se consigue gracias a que el dilatador no está completamente pegado a las paredes del interior de la nariz permitiendo que el aire fluya entre el dispositivo y la piel.

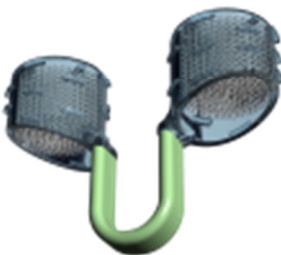

Puente de unión más largo:

Gracias al puente de unión más largo, se puede, si se desea, introducir más el dispositivo en nuestros orificios nasales. También mejoran la adaptabilidad en personas con los orificios nasales separados garantizando de esta manera una correcta colocación.

Packaging:

1.- BEST BREATHE FILTRO NASAL:

BEST BREATHE FILTRO contiene un dispositivo “portafiltro” y 30 unidades de filtros desechables
 Se presenta en una caja expositora (display) de 10 unidades



2. - BEST BREATHE Recambio filtro nasal. HARD/SOFT



Versiones de filtro:

Hard: filtro de color Negro



Soft: Filtro de color Blanco



Calidad:

Best Breathe Company, s.l. está certificada en las normas de calidad:

ISO 9001:2008

ISO 15378:2011



Producto Patentado.



Marca Registrada



Hecho en CE

